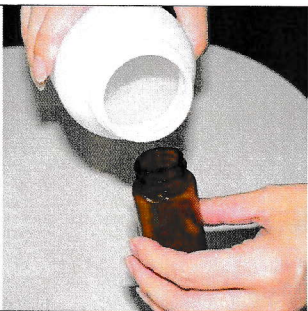


プール水におけるトリハロメタン採水方法について

＜容器はガラス製です。破損する恐れがありますので、プールサイドには持ち込まないでください。＞

	① 採水セット ◆ 褐色ガラスビン＜アスコルビン酸入り＞ ◆ ラベル
	② 別の容器でプール水を採取し、褐色のガラスビンに泡立たないように静かにプール水を入れ、満水にして蓋を閉めます。 【褐色のガラスビン内にはアスコルビン酸が入っていますので、洗い流さないよう注意してください】
	③ 褐色のガラスビンを数回転倒し、気泡が無いことを確認します。 【気泡が確認された場合は②より再度実施します。】
	④ ラベルに必要事項を記入しガラスビンに貼り付けます。

* お客様には褐色ガラスビン 2 本セットを納入させていただきます。＜採水時まで冷暗所に保管して下さい。＞

* 採水時の不備＜気泡が入ってしまった等＞があった場合を除き原則 2 本採水して下さい。

【参考】プール水採水時の残留塩素が 0.4ppm 以上である事を確認して下さい。

採水された褐色ガラスビンを依頼書と一緒に持ち込みください。

一般社団法人 埼玉県食品衛生協会検査センター

連絡先 048-649-5332